

 farmasera

Ameliyatsız
gençleşmede
uzun süreli etki

Happy Lift™



CE
2409

Happy Lift™


Yetişkinlik dönemi ve 20'li yaşlarda yüzün “güzellik üçgeni” olarak tabir edilen V görüntüsü, 30'lu yaşlarda başlayan yaşlanma süreci ile beraber bozulur. Cildin destekleyici yapısının içten bozulmaya başlaması ve dokuların sarkması sonucu derin izler, kırışıklıklar meydana gelir.

“Happy Lift”, yaşlanma sürecinde büyük bir cerrahi ya da görünür yara izleri olmadan cilt altına yerleştirilen özel ipler vasıtasıyla sarkan yüz ovalinin yukarı çekerek toparlanmasını sağlar.



Happy lift: Benzersiz ve Patentli Thread

- Happy Lift Thread, uzunlukları, yoğunlukları, balbları (dikenler) ve açılarını ile özel tasarlanmıştır.
- Alt dermise uygulandıktan sonra balblar yeni destek iskeleti oluştururlar
- Yıllardır güvenle kullanılan PCL-PLLA dan oluşmaktadır.
- 12-18 ay içerisinde metabolize olur.
- Happy Lift Thread'in balblarının oluşturduğu fibrotik reaksiyon ile gelişen kaldırma (askılama) etkisi uzun süre devam eder.
- Operasyondan hemen sonra farkedilen yenilenmiş bir görünüm ve daha iyi bir yüz kontürü elde edilir.

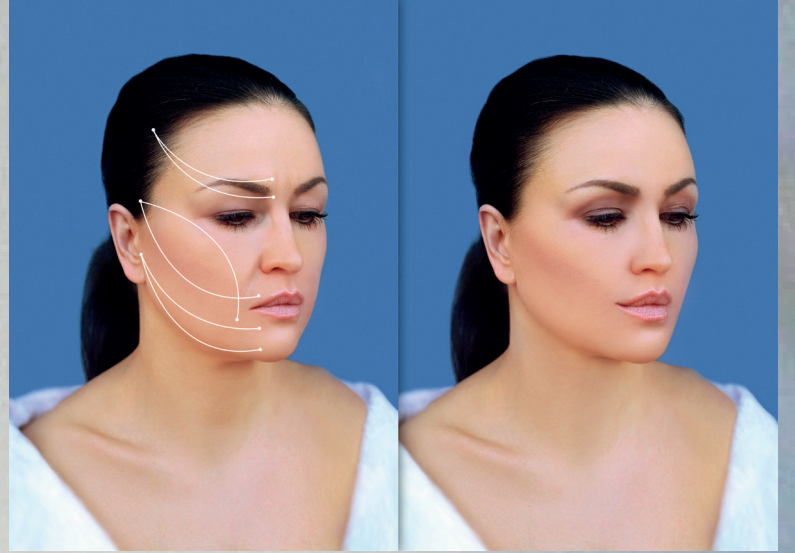

Happy Lift ipleri tüm dünya genelinde plastik cerrah, dermatolog ve medikal estetik doktorlar tarafından tercih edilmektedir. Sterilizasyon ve ambalajlama süreci de dahil olmak üzere, tüm standartlaşmış üretim süreci boyunca ürünün kalitesini garanti eden **CE & FDA onayına sahiptir.**

**“Happy Lift” rejuvenasyon,
lifting etkisinin 5-6 yıla kadar
devam ettiği kanıtlanmıştır.**



GENÇLEŐTİRME İÇİN YENİDEN KONUMLANDIRMA


Kalıcı iz olmadan hızlı iyileşme

Happy Lift
Free Floating



- Free Floating mini invazif bir cerrahi operasyonla sarkık yanakları lift etmek için kullanılan kalıcı veya emilebilen bir ipliktir.
- Uygulama hızlı, güvenli ve kolaydır.
- Free Floating iplikleri, lokal anestezi altında subkutan bir dokuya uzun bir spinal (omurga) iğnesi enjekte edilir. Bu sebeple deride bir kesiğe ihtiyaç duyulmaz.
- Free Floating iplerinde çift yönlü çakışan küçük balblar (dikenler) bulunur. İplikler deri altına girdiğinde, ipliğin yer değiştirmesini önlemek için balblar (dikenler) açılır ve çevre dokuları birleştirerek yumuşak yüz dokuları için destekleyici bir yapı oluşturur.
- Yüz plastisitesi yeniden konumlandırır, toparlanır ve iyileşir (3 boyutlu etki).
- Sonuçlar 2 ila 10/12 ay arasında artar, bundan sonra ise kaldırma etkisinin süresi uzar.




Free Floating'in pozitif etkileri işlem yapıldığı andan itibaren etkisini göstermeye başlar.

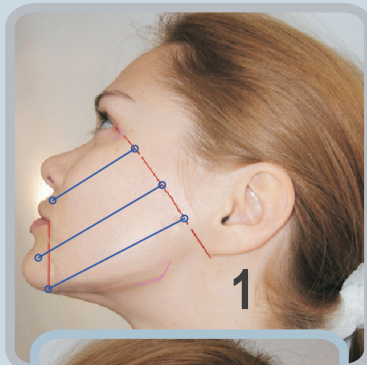

1

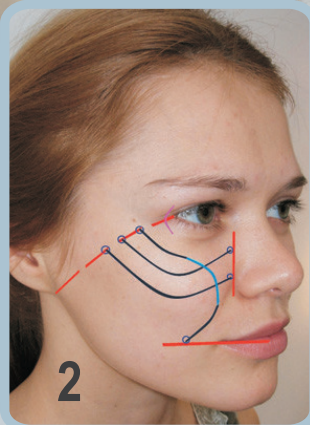

2

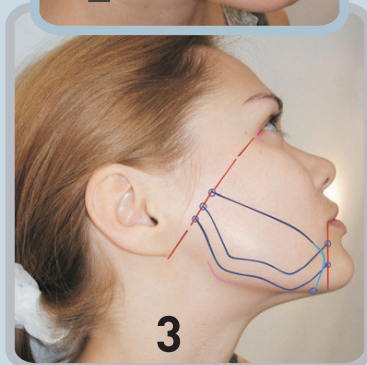

3

- 6 barbed threads in P (LA-CL)
absorbable 12 cm USP 2/0
- 6 barbed threads in P (LA-CL)
absorbable 23 cm USP 2/0




HIZLI VE KOLAY UYGULAMA

Simetrik sonuçlar

Happy Life **Double Needle**

- Double Needle, çift yönlü çakışan iğneli ipliği ile orta derece sarkmış dokulara neşter kullanmadan **hızlı, mini invazif ve doğal bir yaklaşım ile gençleştirme sunar.**
- Double Needle iplikleri, 2 ucunda düz çift hareketli iğneleri olan, spinal iğneye ihtiyaç duymadan subdermise girebilen, hem kalıcı hem emilebilen ipliklerdir.
- Bu özel yapısı sayesinde yarı çember ve döngü yolları gibi daha verimli doku toplama ve sıkılaştırma garanti eden, hacim iyileştirme/geliştirme sağlayan yöntemler rahatça uygulanabilir.
- İmplant, daha hızlı uygulanır, operasyon süresi önemli miktarda kısalır ve hasta için daha iyi bir operasyon sonrası iyileşme süreci sunar.
- Double needle kullanımı, ipliğin iki yarısını da kesin bir şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırır; bu da dokunun ağırlığının, ipliğin iki yarısına doğru dağılımını sağlayarak mutlak simetrik bir sonuç verir.
- Farklı bölgelere kolaylıkla uygulanabilmesi için 12 cm ve 23 cm olarak 2 ayrı formu bulunmaktadır.



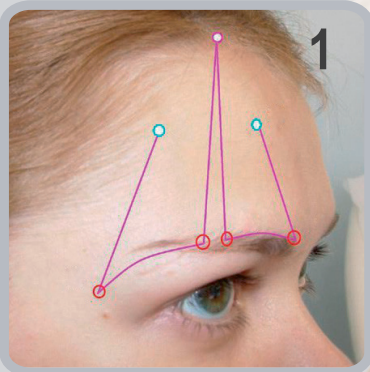

- 6 barbed threads in P (LA-CL) absorbable 12 cm USP 2/0
- 6 barbed threads in P (LA-CL) absorbable 23 cm USP 2/0



Happy Lift™ REVITALIZING THREADS

Free Floating



TRADE NAME	REF NUMBER	THREAD LENGTH	DIAMETER SUTURE (USP)	NEEDLE TYPE	THREADS PER BOX
Happy Lift™ Revitalizing	06HL12	12 cm partly with spines	USP 2 - 0	Not present	6


Happy Lift *Double Needle*




TRADE NAME	REF NUMBER	THREAD LENGTH	DIAMETER SUTURE (USP)	NEEDLE TYPE	THREADS PER BOX
Happy Lift™ Revitalizing Double Needle	06H.L. 12DN/10	12 cm partly with spines	USP 2 - 0	Straight cutt edge double needle 100 mm	6
Happy Lift™ Revitalizing Double Needle	06H.L. 23DN/15	23 cm partly with spines	USP 2 - 0	Straight cutt edge double A 150 mm	6




Farmasera Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Vedat Günyol Caddesi, Defne Sokak, No: 1
Flora Rezidans, Kat: 7 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 36 36 Faks :+90 216 576 36 35
info@farmasera.com.tr www.farmasera.com.tr

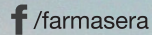

/farmasera

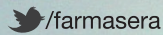

/farmasera

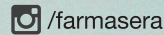

/farmasera